


## Produktinformationen

### aluderm® Komresse einzeln 20 x 20 cm

Aluminiumbedampft, steril in Peelpackung.

aluderm® - die sanfte Wundtherapie. aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm® ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm® bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm® begeistert. Der Erfolg, den aluderm® bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes.

aluderm® ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m<sup>2</sup>) und hydrophobierte PP-Abschlusslage. aluderm® hat viele gute Eigenschaften: aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.

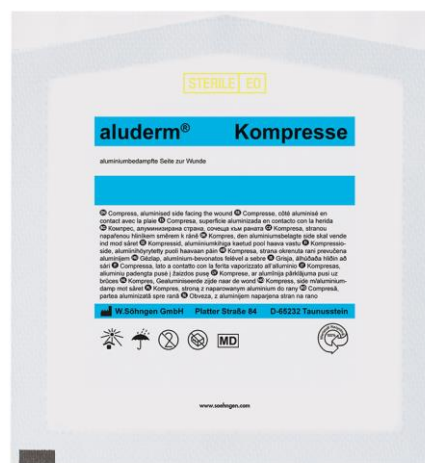

Artikel-Nr.	1003210
GTIN	4250108810025
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	245
Breite in mm	260
Tiefe in mm	3
Gewicht in kg	0,008
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	03147264
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088001HL
UDI-DI	04250108810025
UN-Nr.	
O2 in Liter	0